

AipGel 变性蛋白预制胶,Bis-Tris,8%,15 孔

AipGel Denatured Protein Pregel,Bis-Tris,8%,15 Wells

使用说明书

货号及规格:

目录编号	凝胶尺寸	包装单位
PG0815S	8*10cm	10块/盒

保存条件: 2-8°C运输和保存, 保质期 12 个月。

产品简介:

1. 本产品为聚丙烯酰胺电泳凝胶, 属于变性型电泳凝胶, 主要用于蛋白分离, 单片胶为 12 孔或 15 孔, 12 孔胶每孔最大上样量为 50uL, 15 孔胶每孔最大上样量为 30uL。
2. 本产品采用全自动凝胶灌注技术, 产品的重复性好, 质量稳定。独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更为清晰锐利, 更加均匀, 分辨率更高。
3. 本产品配套电泳缓冲液为中性缓冲液, 可以提高凝胶稳定性和避免蛋白在电泳过程中的再修饰。

产品特点:

操作简便--无需自己配制各种溶液和灌胶操作, 即开即用。

节省时间--最快 20min 跑完电泳, 节省宝贵的时间。

安全无毒--无需接触有毒试剂。

结果稳定--通过全自动、大规模的生产, 保证每片胶之间良好的重复性, 质量稳定。

条带完美--独特的设计, 大大地降低了边缘效应, 电泳结果更完美。

性价比高--国货精品, 质优价廉。

分辨率高--独特的凝胶缓冲配方使蛋白电泳条带更清晰锐利, 分辨率更高。

最佳搭配--每盒预制胶均配有两包 1X MOPS-SDS Running Buffer。

使用方法:

1. 缓冲液准备: 取出一包干粉电泳缓冲液(1X MOPS-SDS Running Buffer)溶解于 1L 去离子水中, 配置成即用型电泳缓冲液。
2. 将预制胶从包装袋中取出, 并撕去胶板底部的蓝色胶条。(如图 1 所示)按箭头方向将梳子从胶板中平稳地平行推出。(如图 2 所示)



图1

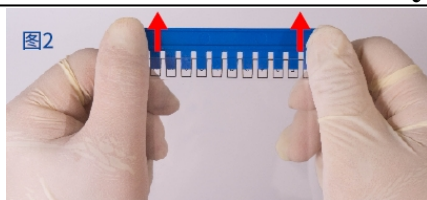



图2

3. 推出梳子时，尽量避免孔道内有残留液体。

4. Bio-Rad、WIX 等品牌硅胶密封条凸起的电泳槽(见图 3)的使用注意事项：将电泳槽内框架的绿色硅胶密封条取出，然后将其平坦的一面朝外并重新插回内框架的凹槽中。(如图 3 所示)



图3

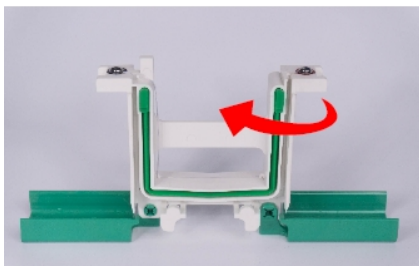

5. 装胶。(按照图 4、图 5 所示的方法将胶板安装到凝胶电泳装置中)

注意：务必确保将底部开口处置于胶条以下位置，不能被胶条遮挡。

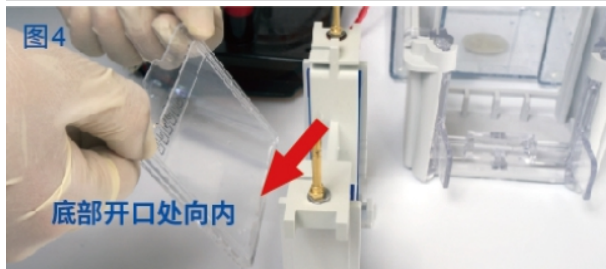


图4

底部开口处向内

图5



6. 向电泳槽的内槽中倒入足够的配制好的电泳缓冲液(1X MOPS-SDS Running Buffer), 使其覆盖上样孔 5-7 mm, 在外槽中加入相同的电泳缓冲液以确保适当的冷却。为了获得最好的效果, 外槽的缓冲液需要比内槽的位置稍低, 不可漫过胶板。使用注射器或其他工具吸取适量电泳缓冲液(1X MOPS-SDS Running Buffer), 将上样孔轻轻冲洗干净, 去除气泡和残留的储存缓冲液。将蛋白质样品上样、电泳。


注意: 推荐电压为 160V, 最高不超过 180V。

注意: Tris-Glycine 电泳缓冲液与 AipGel™蛋白预制胶的 Bis-Tris 缓冲系统不兼容, 请不要使用。

7. 从胶板中取出凝胶。(如图 6 所示)

- 1) 电泳结束后, 从电泳槽中将胶板取出。
- 2) 将合适的撬具小心插入胶板之间的空隙中。
- 3) 按照图中所示方法慢慢撬动胶板上、中、下三个位置, 直至胶板两侧完全分开。
- 4) 胶板打开之后, 凝胶可能粘在任意一侧, 将有凝胶的胶板有胶一侧浸入水中, 贴着水面, 胶板倾斜轻轻提起, 凝胶掉入水中后, 将凝胶从水中取出进行后续实验。

图6

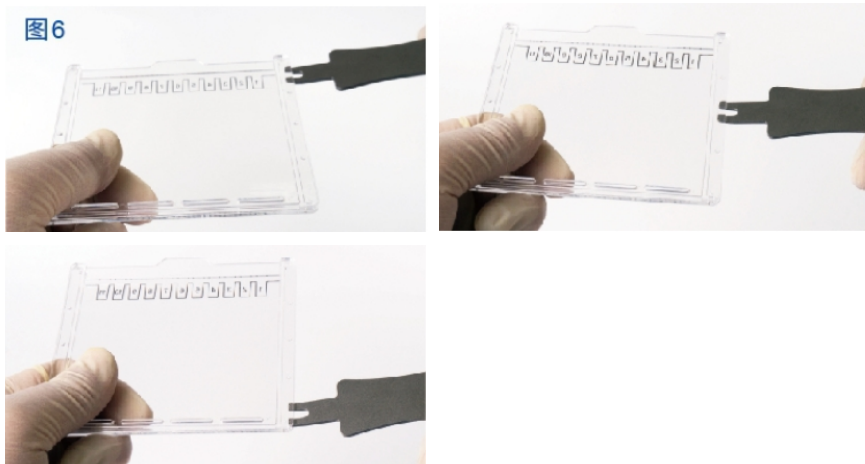

凝胶选择:

4-12% MOPS	4-20% MOPS	8% MOPS	10% MOPS	12% MOPS
	270 Kd			185 Kd
270 Kd	185 Kd	270 Kd	185 Kd	140 Kd
	140 Kd		140 Kd	115 Kd
185 Kd	115 Kd	185 Kd	115 Kd	80 Kd
140 Kd	80 Kd	140 Kd		65 Kd
115 Kd	65 Kd	115 Kd	80 Kd	
80 Kd	50 Kd		65 Kd	50 Kd
65 Kd	40 Kd	80 Kd	50 Kd	40 Kd
50 Kd	30 Kd	65 Kd	40 Kd	30 Kd
40 Kd	25 Kd	50 Kd	30 Kd	25 Kd
30 Kd	30 Kd		25 Kd	
25 Kd	15 Kd	40 Kd		15 Kd
15 Kd	10 Kd	30 Kd	15 Kd	10 Kd
		25 Kd		

注意事项:

- 使用预制胶时，请务必按照预制胶使用方法和操作配制电泳缓冲液，推荐直接使用本公司预制胶专用电泳液 1X MOPS-SDS Running Buffer(货号: P151)，配置好的 1X MOPS-SDS Running Buffer 反复使用次数建议不超过 3 次。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 本试剂仅供科研使用，严禁用于临床诊断、药物或其他。

=====



扫码关注我们